

REHASHOP Elektrorollstuhl Tiger: Umbau auf Linkshänderbetrieb

Die Arbeitsschritte für den Umbau auf Linkshänderbetrieb sind die folgenden:

1. Lösen Sie mithilfe eines Sechskantschlüssels die Schrauben, welche die für die Fixierung der Armlehnen sorgen, um die linke mit der rechten Armlehne tauschen zu können.

(Abb. 1)



2. Entfernen Sie die Kabelführung an der Rückseite des Rollstuhls. Öffnen Sie den Verschluss der Kabelführung.

(Abb. 2)



3. Falten Sie den Rollstuhl zusammen, um das Bedienelement nun zwischen Sitz und Rückenlehne hindurchschieben zu können. Der Kabelbaum befindet sich dabei im Inneren der Armlehne. (Abb. 3-5)



4. Fixieren Sie das Bedienelement, indem Sie es mit der linken Armlehne verschrauben und die Kabelführung der Armlehne anbringen. (Abb. 6)



REHASHOP electric wheelchair Tiger: Controller Switching Position

Please follow these steps to change the position of the joystick from the right to the left side:

1. Unscrew the handrails on both sides with a hexagonal bar and exchange the left and right handrails.

(Fig. 1)





2. Remove the clasp from the groove and open the fixed clasp.

(Fig. 2)



3. The wheelchair is folded in half to facilitate the controller to pass between the seat cushion and the back cushion, and the controller harness locates in the inside of the armrest. (Fig. 3-5)

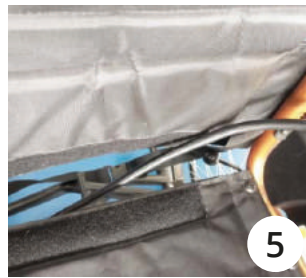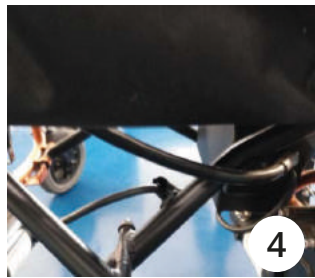

4. The controller is installed on the left side bracket, fixing the screw and thread buckle, and the thread buckle is located in the inside of the armrest. (Fig. 6)



REHASHOP Fauteuil roulant électrique Tiger: Transformation pour gaucher

Veillez suivre les étapes suivantes pour convertir le fauteuil en mode gaucher.

1. Utilisez une clé hexagonale pour desserrer les vis qui fixent les accoudoirs afin d'intervertir les accoudoirs gauche et droits.

(Fig. 1)





2. Retirez le guide-câble à l'arrière du fauteuil roulant. Ouvrez le volet du guide-câble.

(Fig. 2)



3. Repliez le fauteuil roulant pour pousser l'élément de commande entre le siège et le dossier. Le faisceau de câbles doit être situé à l'intérieur de l'accoudoir.

(Fig. 3-5)

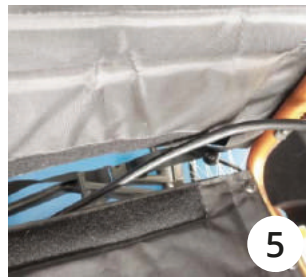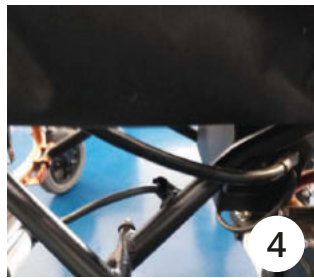

4. Sécurisez la boîte de commande en la vissant sur l'accoudoir gauche et en fixant le guide-câble sur l'accoudoir.

(Fig. 6)



REHASHOP elektrische rolstoel Tiger: aanpassing voor linkshandige bediening

De te verrichten stappen voor de aanpassing naar linkshandige bediening zijn als volgt:

1. Gebruik een inbusleutel om de schroeven los te maken waarmee de armleuningen zijn bevestigd, om de linker- met de rechterarmsteun te verwisselen.

(Fig. 1)




2. Verwijder de kabelgeleider aan de achterkant van de rolstoel. Open de sluiting van de kabelgeleider.

(Fig. 2)



3. Vouw de rolstoel samen om het bedieningselement tussen de stoel en de rugleuning te duwen. De kabelboom bevindt zich in het binnenste van de armleuning. (Fig. 3-5)

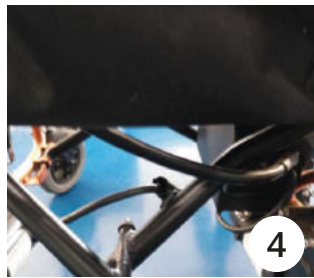

4. Fixeer het bedieningselement door hem aan de linkerarmsteun vast te schroeven en de kabelgeleider van de armsteun te bevestigen. (Fig. 6)

