

# Q50 R carbon

Einfacher reisen mit diesem nur 14,5 kg  
leichten elektrischen Faltrollstuhl aus Carbon



ZUGELASSEN FÜR FLUGREISEN\*



# LANGSTRECKENFLÜGE. FAMILIENFREIZEIT. DAS TÄGLICHE PENDELN.

Was auch immer Ihr Ziel ist, der **Q50 R Carbon** ist Ihr perfekter Reisepartner. Mit einem Gewicht von nur **14,5 kg** (ohne Akku) und aus Carbonfasern gefertigt, entlasten Sie Ihren Geist (und Ihre Arme) mit dem Wissen, dass dieser Elektrorollstuhl mühelos zu heben ist. Er lässt sich in Sekundenschnelle zusammenfalten und auf engstem Raum verstauen - und das alles, ohne den Akku entnehmen zu müssen. Außerdem verfügt er über die robuste und zuverlässige QUICKIE-Leistung, mit der Sie von A-B (oder sogar A-Z mit seiner erweiterten **Reichweite von 24 km\*\***) reisen können. Und mit 5 beeindruckenden Akzentfarben können Sie überall, wo Sie hingehen, einen Hauch von Stil verbreiten.



Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Telefons Kamera, um das Video anzusehen.



\* Einzelne Fluggesellschaften haben unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf den Transport von Produkten mit Li-Ion-Batterien. Bevor Sie eine Flugreise mit dem Rollstuhl buchen, vergewissern Sie sich bitte bei Ihrer Fluggesellschaft, dass sie batteriebetriebene Fahrzeuge unter folgenden Bedingungen akzeptiert: UN-Klassifizierung: UN3171. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

\*\* Mit optionalem Zusatzakku

## DESIGN

# CARBON. LEICHT, ABER UNGLAUBLICH STARK.

Einige der leichtesten Dinge auf der Welt sind daraus hergestellt, darunter der Q50 R Carbon. Vollkommen verführerisch. Vollkommen faszinierend. Und mit einem Gewicht von nur 14,5 kg beeindruckt er mehr als tief. Sein Carbon-Rahmen dämpft durch die Materialeigenschaften unebene Fahrwege und bietet einzigartige stoßdämpfende Eigenschaften, die für eines der sanftesten und effizientesten Fahrerlebnisse überhaupt sorgen.

## 136 KG

MAXIMALE ZULADUNG

Der Q50 R Carbon wiegt nicht nur weniger dank seiner unglaublich stabilen Kohlefaserkonstruktion, sondern erlaubt auch eine maximale Zuladung von bis zu **136 kg!**



## REISEN

# BRINGT DICH AN ORTE, DIE ANDERE NICHT ERREICHEN KÖNNEN.

Der Q50 R Carbon lässt sich so unglaublich kompakt zusammenfalten, dass er fast überall hinpasst! Nehmen Sie den Zug, steigen Sie in ein Flugzeug oder verstauen Sie ihn im Kofferraum des kleinsten Autos - er ist perfekt, um Orte in der Nähe oder in der Ferne zu erkunden. Unglaublich leicht, lässt er sich mühelos ein- und ausladen.



### MÜHELOS EINFACHES FALTEN

Es gibt keine komplizierten Mechanismen - einfach **(1)** den Clip an der Rückseite hochklappen und **(2)** die Rückenlehne nach unten drücken, um den Q50 R Carbon zusammenzufalten. Sie müssen nicht einmal den Akku herausnehmen. **So einfach geht das!**



Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Handys, um Ihre kostenlose Probefahrt zu buchen.



**370 mm**  
LÄNGE

**767 mm**  
HÖHE

### TRANSPORTGURT INKLUSIVE

Haben Sie es satt, dass sich Ihr Elektrorollstuhl beim Heben auffaltet? Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Transportgurt des Q50 R Carbon wird Ihr Q50 R Carbon beim Anheben zuverlässig gefaltet bleiben.



### ABNEHMBARER LITHIUM-IONEN-AKKU

Mit einem Gewicht von nur **1,4 kg** und einer eigenen Ladebuchse muss der Q50 R Carbon nicht ausgepackt werden, wenn die Ladung zur Neige geht. Stattdessen nehmen Sie einfach den Akku heraus und laden Sie ihn separat auf!

### ALTERNATIVE MOBILITÄT


## WEITER KOMMEN MIT 24 KM ERWEITERTER REICHWEITE.

Lassen Sie Ihr Auto zu Hause und genießen Sie eine Reichweite von bis zu 12 km mit dem 10 Ah Lithium-Ionen-Akku. Sie wollen weiter fahren? Mit dem zusätzlichen Batteriefach können Sie einen (optionale) zweiten Akku für die Fahrt mitnehmen und so die Reichweite auf bis zu 24 km zu verdoppeln!

### LADUNG AUCH IM GEFALTETEN ZUSTAND

Da Sie den Akku beim Falten des Q50 R Carbon nicht entnehmen müssen, kann er auch bequem über die Steckdose am Controller aufgeladen werden.



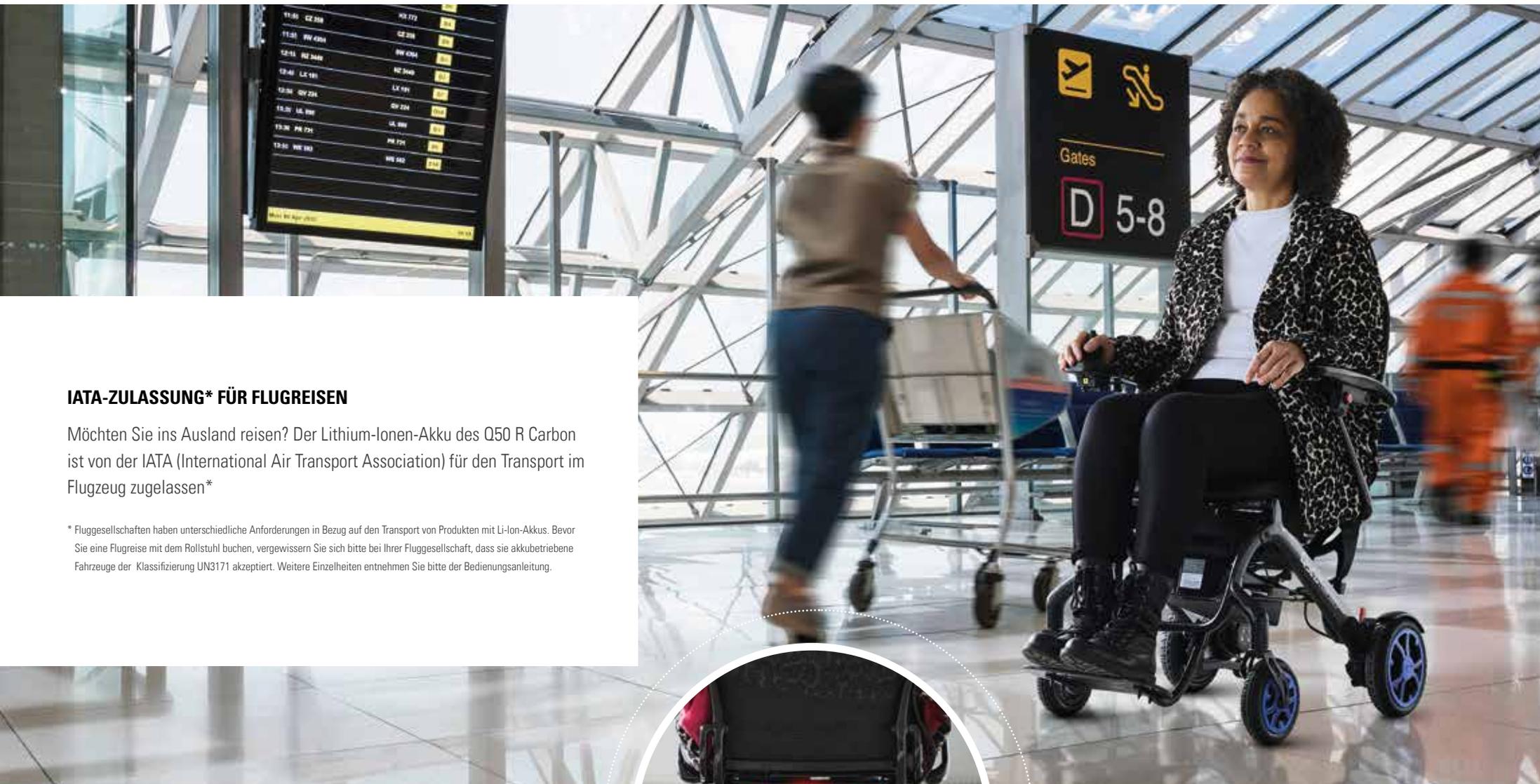

## IATA-ZULASSUNG\* FÜR FLUGREISEN

Möchten Sie ins Ausland reisen? Der Lithium-Ionen-Akku des Q50 R Carbon ist von der IATA (International Air Transport Association) für den Transport im Flugzeug zugelassen\*

\* Fluggesellschaften haben unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf den Transport von Produkten mit Li-Ion-Akkus. Bevor Sie eine Flugreise mit dem Rollstuhl buchen, vergewissern Sie sich bitte bei Ihrer Fluggesellschaft, dass sie akkubetriebene Fahrzeuge der Klassifizierung UN3171 akzeptiert. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.



## RÜCKLICHT

Mit diesem superhellen Rücklicht werden Sie bei Tag und Nacht gesehen. Es wird immer dann aktiviert, wenn Ihr Q50 R Carbon in Bewegung ist. Es erhöht es Ihre Sichtbarkeit und die Aufmerksamkeit anderer in Ihrer Umgebung.

## PERFORMANCE

# ... AUSGEFALTET GENAUSO KOMPAKT.

**Kompakt und straßentauglich - der Q50 R Carbon ist auf jede Situation vorbereitet. Ob in einem engen Hausflur, einem belebten Einkaufszentrum oder in öffentlichen Verkehrsmitteln: der Q50 R Carbon hat die Energie, um den Alltag bei kompakten Abmessungen zu meistern.**

## 800 mm

### WENDEKREIS

Im Gegensatz zu einem Elektroroller hat der Q50 R Carbon einen kleinen Wenderadius von 800 mm, was ihn ideal für Innenräume macht. Wenden Sie mühelos in engen Fluren, Küchen und anderen beengten Räumen.




## 570 mm

### GERINGE BREITE

Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie mit dem Rahmen Ihres Q50 R Carbon zu Hause anstoßen- seine schlanke Breite von 570 mm passt problemlos durch schmale Türöffnungen und durch belebte Räume.

## MACHEN SIE ES SICH BEQUEM

Die ultraleichte Rückenlehne sorgt nicht nur für Bequemlichkeit, ihre atmungsaktive Polsterung lässt Körperwärme durch, damit Sie kühl und trocken bleiben. Das serienmäßige, **30 mm** dicke Schaumstoffkissen sorgt auch auf längeren Fahrten für Komfort.

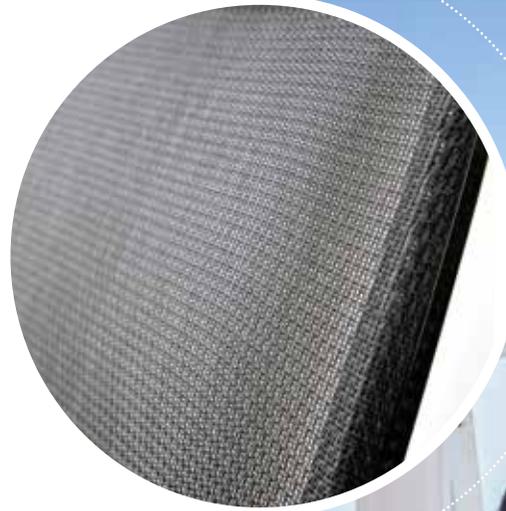

## EINFACHER TRANSFER

Bequemer seitlicher Ein- und Ausstieg in Ihren Q50 R Carbon indem Sie die Armlehnen nach oben klappen. Sie bevorzugen den Transfer im Stehen? Die mittig montierte Fußstütze lässt sich bequem nach oben klappen, damit Sie den nötigen Platz haben.



## ZUVERLÄSSIGKEIT

# GERINGES GEWICHT, GROSSE ZUVERLÄSSIGKEIT.

Seit über 40 Jahren arbeiten wir mit Weltklasse-Herstellern zusammen, um solide gebaute Elektrorollstühle zu liefern, die die besten Fahrleistungen, Motoren und Reichweiten aufweisen sowie eine Zuverlässigkeit, die andere nicht bieten können.

### NVR2 BLDC BÜRSTENLOSER DC MOTOR REGLER

Intuitiv bedienbar ist der bewährte und zuverlässige nVR2 BLDC-Regler für bürstenlose Motoren der weltweit führenden Curtiss-Wright Corporation. Er reagiert präzise auf Ihre Befehle und behält zudem den Überblick über die verbleibende Akku-Laufzeit.



### HOCHEFFIZIENTE BÜRSTENLOSE 250 WATT MOTOREN

Geliefert von Linix (einem weltweit führenden Motorhersteller), bieten diese Hochleistungsmotoren die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie im Alltag brauchen (einschließlich der Überwindung von Hindernissen von bis zu 40 mm). Hochgradig optimiert, erzielen sie die bestmögliche Reichweite aus Ihren Akkus.

STYLE

## DER LETZTE SCHLIFF.

Mit seinem eleganten Kohlefaserrahmen ist der Q50 R Carbon ein echtes Aushängeschild. Warum sorgen Sie also nicht mit mit einer Auswahl unter 5 Akzentfarben für noch mehr Aufsehen?



Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Telefons Kamera, um zum online-Konfigurator zu gelangen!



# TECHNISCHE DATEN

<b>Gesamtabmessungen (L/B/H)</b>	923 mm / 570 mm / 928 mm
<b>Abmessungen im gefalteten Zustand (L/B/H)</b>	370 mm / 570 mm / 767 mm
<b>Sitztiefe</b>	420 mm
<b>Sitzbreite</b>	440 mm
<b>Rückenhöhe</b>	464 mm
<b>Max. Kantensteigfähigkeit</b>	40 mm
<b>Max. Reichweite (ISO 7176-4)</b>	12 km (24 km mit optionaler Zusatzbatterie)
<b>Gewicht (ohne Akku)</b>	14,5 kg
<b>Gewicht eines Akkus</b>	1,4 kg
<b>Max. Zuladung</b>	136 kg
<b>Antriebsräder</b>	8"
<b>Lenkräder</b>	6,5"
<b>Max. Steigfähigkeit</b>	6°
<b>Wendekreis</b>	800 mm
<b>Max. Geschwindigkeit</b>	6 km/h
<b>Batterie</b>	24V, 10Ah Lithium-Ion
<b>Steuereinheit</b>	Curtis Wright Controller für bürstenlose Motoren
<b>Motor</b>	zwei 250 Watt Hochleistungsmotor
<b>Transport ohne Nutzer</b>	Befestigen Sie den Rollstuhl sorgfältig im Fahrzeug oder Flugzeug
<b>Bestimmungsgemäße Anwendung und Umgebung</b>	Für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Innen- und Außennutzung, Rollstuhl Typ Klasse A

Sunrise Medical ist um Ihre Sicherheit besorgt. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für sichere Betriebsanweisungen und Wartungsrichtlinien.

Hersteller: Zhejiang Innuovo Rehabilitation, Devices Co. Ltd, No. 1896 Industry Road, Hengdian Movie Zone, Dongyang, Zhejiang, China.  
Im Rahmen der ständigen Produktverbesserung behält sich Innuovo das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Änderungen an den Informationen für bestehende Benutzer müssen jedoch klar kommuniziert werden, wenn sie sicherheitskritisch sind. Nicht alle Funktionen und Optionen sind mit allen Konfigurationen kompatibel. Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können sich ändern. Wenn Sie sehbehindert sind, können Sie sich dieses Dokument im PDF-Format unter [www.sunrisemedical.de](http://www.sunrisemedical.de) ansehen.



000650571/Sonmendruck/1000/0623



Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: [kundenservice@sunrisemedical.de](mailto:kundenservice@sunrisemedical.de)

[www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de)